

Utilisation du système clos d'aspiration TrachSeal™

Systemes clos d'aspiration TrachSeal

Installation

A l'aide du tableau, choisir le TrachSeal approprié en fonction du diamètre de la sonde trachéale ou de trachéotomie utilisée.

| Diam. sonde | TrachSeal |
|-------------|-----------|
| 7.0mm | F10 ● |
| 7.5mm | F10 ● |
| 8.0mm | F12 ○ |
| 8.5mm | F12 ○ |
| 9.0mm | F14 ● |
| 9.5mm | F14 ● |
| 10.0mm | F16 ● |



Détacher l'outil de déconnexion fixé au capuchon solide.



Connecter le TrachSeal entre la sonde endotrachéale/de trachéotomie et la pièce en Y du circuit respiratoire. L'utilisation du raccord extensible est facultative. En cas d'utilisation du TrachSeal 72 heures, s'assurer que la valve d'isolation est en position fermée.



Une planche d'étiquettes colorées est fournie avec chaque TrachSeal. Coller l'étiquette correspondant au jour de changement du TrachSeal.

TrachSeal 24 heures

| Réf. | Description | Taille |
|-----------|----------------------|--------|
| ● 3240003 | Adulte, endotrachéal | F10 |
| ○ 3240000 | Adulte, endotrachéal | F12 |
| ● 3240001 | Adulte, endotrachéal | F14 |
| ● 3240002 | Adulte, endotrachéal | F16 |
| ● 3240004 | Adulte, trachéotomie | F10 |
| ○ 3240005 | Adulte, trachéotomie | F12 |
| ● 3240006 | Adulte, trachéotomie | F14 |
| ● 3240007 | Adulte, trachéotomie | F16 |

TrachSeal 72 heures

| Réf. | Description | Taille |
|-----------|----------------------|--------|
| ● 3720003 | Adulte, endotrachéal | F10 |
| ○ 3720000 | Adulte, endotrachéal | F12 |
| ● 3720001 | Adulte, endotrachéal | F14 |
| ● 3720002 | Adulte, endotrachéal | F16 |
| ● 3720004 | Adulte, trachéotomie | F10 |
| ○ 3720005 | Adulte, trachéotomie | F12 |
| ● 3720006 | Adulte, trachéotomie | F14 |
| ● 3720007 | Adulte, trachéotomie | F16 |


Procédure d'aspiration

1. Connecter la tubulure d'aspiration sur le raccord d'aspiration du TrachSeal.
2. La pression négative d'aspiration ne devrait pas dépasser 150mmHg.
3. Avant l'aspiration, pré-oxygéner le patient suivant le protocole instauré par l'établissement.

Procédure d'après la publication des pratiques cliniques recommandées par l'AARC : Endotracheal Suctioning of Mechanically Ventilated Patients With Artificial Airways 2010.



Sur la version 72 heures, ouvrir la valve d'isolation en alignant les deux flèches.

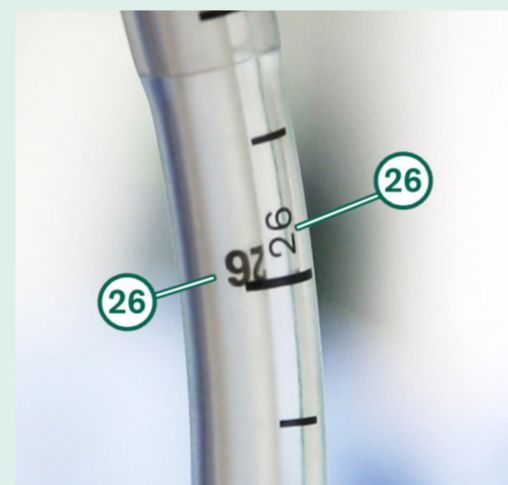

Insérer délicatement le cathéter jusqu'à aligner ses graduations avec celles de la sonde. Puis, l'insérer de deux centimètres supplémentaires.



Presser la valve d'aspiration tout en retirant doucement le cathéter d'un mouvement rectiligne. L'aspiration ne devrait pas dépasser 15 secondes.



Retirer le cathéter jusqu'à l'apparition du marqueur noir et la sensation d'un 'clic'.



Sur la version 72 heures, verrouiller la valve d'isolation après aspiration.

TrachSeal 24 heures avec ampoules NaCl

| Réf. | Description | Taille |
|-----------|----------------------|--------|
| ● 3241003 | Adulte, endotrachéal | F10 |
| ○ 3241000 | Adulte, endotrachéal | F12 |
| ● 3241001 | Adulte, endotrachéal | F14 |
| ● 3241002 | Adulte, endotrachéal | F16 |
| ● 3241004 | Adulte, trachéotomie | F10 |
| ○ 3241005 | Adulte, trachéotomie | F12 |
| ● 3241006 | Adulte, trachéotomie | F14 |
| ● 3241007 | Adulte, trachéotomie | F16 |

Procédure de nettoyage



Ouvrir le capuchon du port d'irrigation et insérer une seringue ou ampoule de NaCl. Presser la valve pour activer l'aspiration. Rincer jusqu'à ce que l'extrémité du cathéter soit propre. Refermer le capuchon du port d'irrigation.



Il est important de verrouiller la valve d'aspiration à la fin de la procédure. Cette action permet de prévenir toute activation non désirée de la valve, pouvant potentiellement compromettre la ventilation du patient.

Retrait



Utiliser l'outil de déconnexion inclus pour débrancher le TrachSeal de la sonde. L'insérer entre les raccords de la sonde et du TrachSeal et appuyer avec le pouce. Jeter le TrachSeal en respectant la procédure instaurée dans l'établissement.

TrachSeal 72 heures avec ampoules NaCl

| Réf. | Description | Taille |
|-----------|----------------------|--------|
| ● 3721003 | Adulte, endotrachéal | F10 |
| ○ 3721000 | Adulte, endotrachéal | F12 |
| ● 3721001 | Adulte, endotrachéal | F14 |
| ● 3721002 | Adulte, endotrachéal | F16 |
| ● 3721004 | Adulte, trachéotomie | F10 |
| ○ 3721005 | Adulte, trachéotomie | F12 |
| ● 3721006 | Adulte, trachéotomie | F14 |
| ● 3721007 | Adulte, trachéotomie | F16 |

Tout au long de la procédure, le patient doit être surveillé visuellement et au moyen des appareils de monitoring. Suivre les recommandations sur l'aspiration trachéale.

Cliquez sur l'icône pour visionner la vidéo de présentation TrachSeal

INTERSURGICAL
SPECIALISTE DE L'ABORD RESPIRATOIRE

33, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Le Pérépole, 94127 Fontenay Sous Bois Cedex
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38
info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr

Interagir avec nous
 www.intersurgical.fr