



# nFlow™ CosyFit

Système de CPAP nasale pour nouveau-né



Soins Intensifs ▪ Circuits respiratoires



# nFlow™ **CosyFit**

## Conçu pour prendre soin

Souvent, les plus petits patients ont besoin des plus grands soins. La sécurité et le confort sont vitaux pour aider le nouveau-né dans les premières étapes de sa vie.

### Une solution pour la CPAP nasale du nouveau-né

Le système nFlow™ d'Intersurgical offre une solution complète de soins pour la CPAP du nouveau-né, avec technologie éprouvée 'gas flip' (bascule de flux), pour un faible travail respiratoire et une alternative au ventilateur de CPAP.

### Support de tuyau

Conception légère et sûre pour un positionnement et un ajustement aisés

### Lacets du bonnet



Souples et résistants pour maintenir un ajustement confortable et fiable tout au long du traitement

### Bonnet

Disponible en 12 tailles, le bonnet respirant en coton nFlow CosyFit contient 3 bandes de fixation aidant à assurer un ajustement doux et confortable, du plus petit au plus grand patient

### Bonnet CosyFit

Le bonnet CosyFit permet d'attacher le générateur de manière simple et précise et aide à créer un ajustement doux et sûr, même pour les patients les plus sensibles.

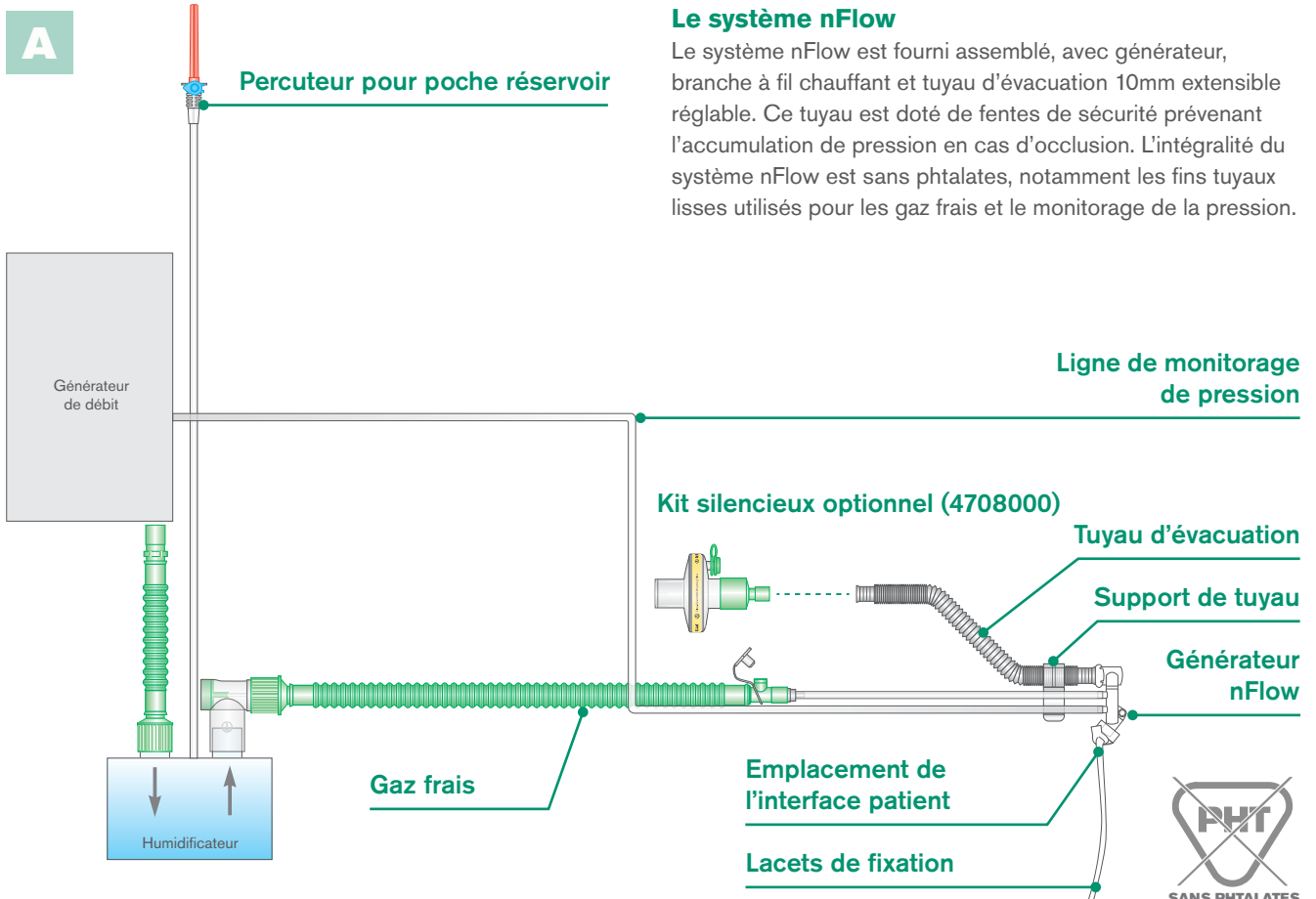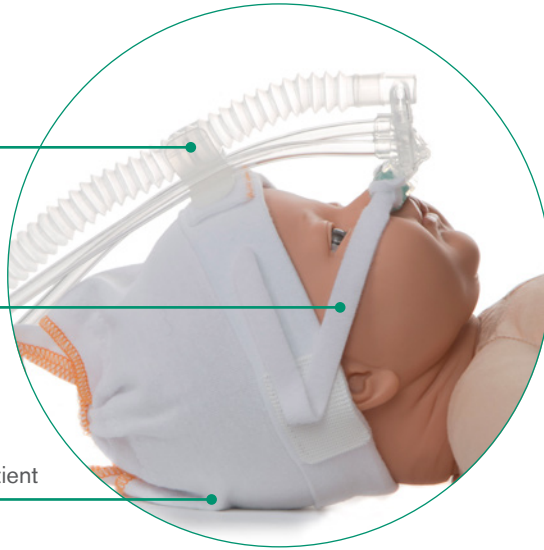

### Le système nFlow


Le système nFlow est fourni assemblé, avec générateur, branche à fil chauffant et tuyau d'évacuation 10mm extensible réglable. Ce tuyau est doté de fentes de sécurité prévenant l'accumulation de pression en cas d'occlusion. L'intégralité du système nFlow est sans phtalates, notamment les fins tuyaux lisses utilisés pour les gaz frais et le monitoring de la pression.

\* sauf référence 4861000



## Large choix d'interfaces et de bonnets

Les interfaces Patient et les bonnets CosyFit sont disponibles séparément pour limiter les déchets. Utilisez les guides de taille fournis pour choisir les solutions adaptées à vos patients.

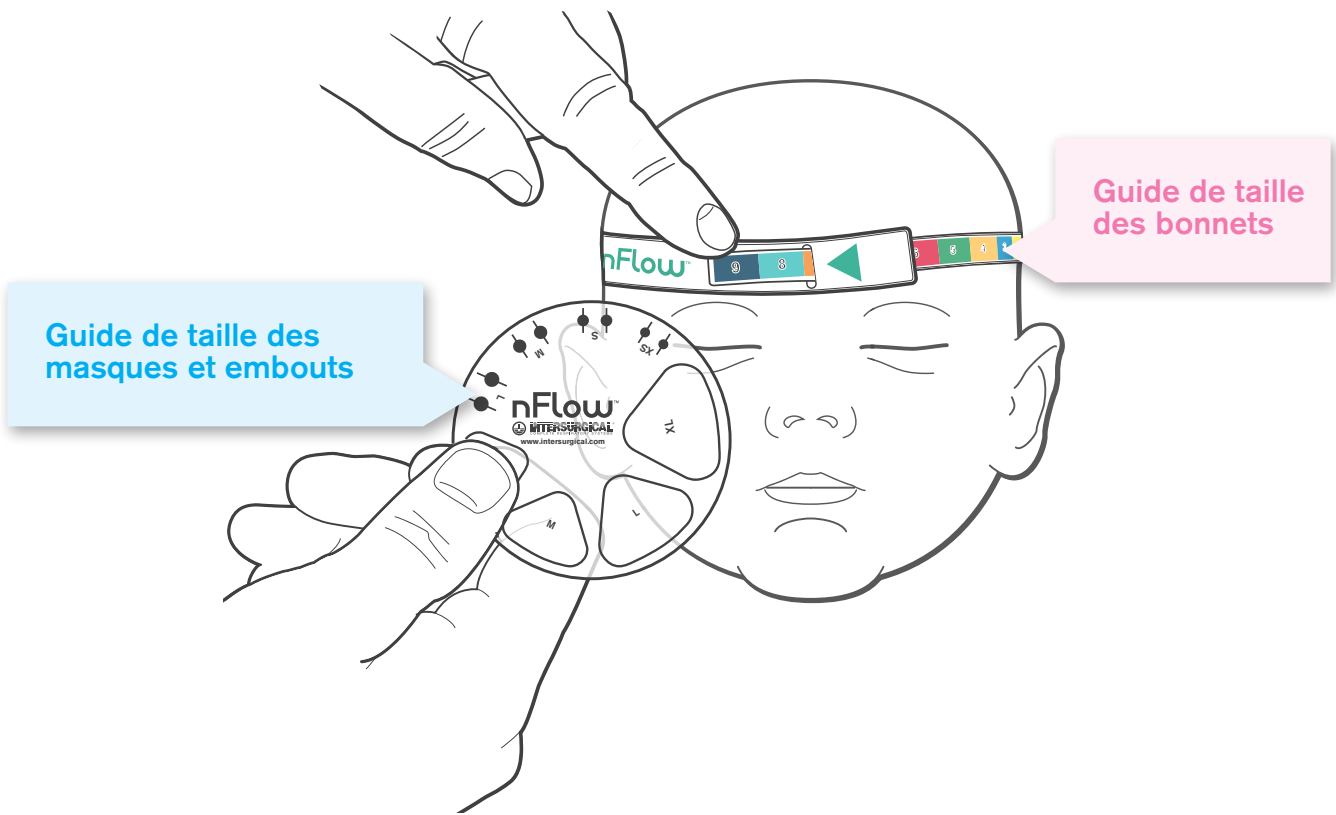


### 12 bonnets

Disponibles séparément en douze tailles avec code couleur. Chaque bonnet CosyFit possède 3 points de fixation pour sécuriser le support de tuyau et les lacets du bonnet.



### Interfaces Patient

Les masques et embouts sont disponibles séparément en quatre tailles. Le silicone souple et confortable qui les compose assure un ajustement optimal.

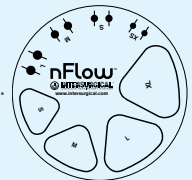

### B Bonnets CosyFit



### C Masques nasaux



### D Embouts nasaux




Faire une demande

En savoir plus

Regarder la vidéo



Pour simplifier vos commandes, composez votre circuit complet en choisissant parmi les références des groupes A et B, puis les interfaces patient des groupes C et/ou D. A tout moment, vous pouvez commander vos éléments séparément selon vos besoins

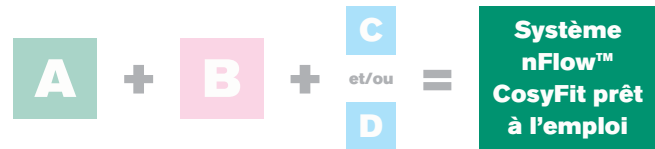

Référence	Description	Qté/bte	
<b>A Circuits respiratoires nFlow CosyFit</b>			
4800000	nFlow CosyFit circuit respiratoire de CPAP à fil chauffant pour nouveau-né. ≥ 1.6m	12	
4800001	nFlow CosyFit circuit respiratoire de CPAP à fil chauffant pour nouveau-né. ≥ 1.8m	10	
4800016	nFlow CosyFit circuit respiratoire de CPAP à fil chauffant pour nouveau-né, avec ligne de monitoring amovible. ≥ 1.8m	10	
4861000	nFlow CosyFit circuit respiratoire de CPAP à fil chauffant pour nouveau-né avec ligne de monitoring amovible, pour respirateurs Fabian™. ≥ 1.8m	10	
<b>B Bonnets nFlow CosyFit</b>			
		<b>Taille</b>	
4907009	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, marine	Taille 9 (40 - 42 cm)	10
4907008	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, turquoise	Taille 8 (38 - 40 cm)	10
4907007	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, orange	Taille 7 (36 - 38 cm)	10
4907006	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, rouge	Taille 6 (34 - 36 cm)	10
4907005	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, vert	Taille 5 (32 - 34 cm)	20
4907004	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, orange clair	Taille 4 (30 - 32 cm)	20
4907003	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, bleu	Taille 3 (28 - 30 cm)	20
4907002	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, jaune	Taille 2 (26 - 28 cm)	20
4907001	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, gris foncé	Taille 1 (24 - 26 cm)	20
4907110	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, rose	Taille 0 (22 - 24 cm)	20
4907100	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, gris	Taille 00 (20 - 22 cm)	20
4907000	nFlow CosyFit, bonnet pour nouveau-né, blanc	Taille 000 (18 - 20 cm)	20
<b>C Masques nasaux nFlow</b>			
		<b>Taille</b>	
4716000	Masque nasal nFlow	Extra grand	30
4706000	Masque nasal nFlow	Grand	30
4705000	Masque nasal nFlow	Moyen	30
4704000	Masque nasal nFlow	Petit	30
<b>D Embouts nasaux nFlow</b>			
		<b>Taille</b>	
4703000	Embout nasal nFlow	Grand	30
4702000	Embout nasal nFlow	Moyen	30
4701000	Embout nasal nFlow	Petit	30
4711000	Embout nasal nFlow	Extra petit	30

Fabian is a trade name of Acutronic Medical Systems.

IS1.59 BEFR • issue 1 04.22



Intersurgical Benelux B.V. Vluchttoord 28, 5406 XP, Uden, Nederland

T: +31 (0)413 243 860 F: +31 (0)413 243 869 info@intersurgical.be be-fr.intersurgical.com



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié  
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,  
ISO 14001:2015 et MDSAP

**Pensez-y avant d'imprimer**  
Économisons les ressources.  
Si vous devez imprimer ce  
document, faites-le recto verso.