



Masque oxygène haute concentration adulte Intersurgical EcoLite™



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Oxygénothérapie



Intersurgical EcoLite™ adult high concentration oxygen mask

Bienvenue dans la zone de confort

La conception unique et les matériaux utilisés dans la fabrication du masque Intersurgical EcoLite™ offrent un confort accru du patient et un impact environnemental réduit.

Confortable pour le patient

L'amélioration du confort du patient est l'une des clés du développement du masque Intersurgical EcoLite™. Les dernières techniques de fabrication permettent de combiner deux matériaux sans PVC au sein d'un même dispositif. Le polypropylène constituant le corps du masque Intersurgical EcoLite™ est transparent, léger et suffisamment rigide pour maintenir la forme du masque, tandis que le second matériau en TPE, plus souple, constitue la lèvre étanche entrant en contact avec le visage du patient.

Confortable pour l'environnement

Le masque Intersurgical EcoLite™ est le pilier de la gamme Eco, véritable reflet de notre engagement dans le développement durable. De nombreux organismes remettent en question l'utilisation du PVC dans les produits médicaux et son impact sur l'environnement. L'utilisation de matériaux alternatifs a permis l'élimination du PVC dans le masque Intersurgical EcoLite™, réduisant de fait l'impact environnemental.

Intersurgical EcoLite

En savoir plus

Gamme Eco

En savoir plus



Ourlet nasal incurvé

S'adapte à différentes formes de nez pour prévenir toute fuite d'oxygène au niveau des yeux

Sans pince-nez métallique

Compatible IRM

Masque transparent

Excellente visibilité des signes cliniques

Valves de sécurité intégrées

Permet au patient d'inspirer l'air ambiant en cas de défaut d'apport en oxygène

Lèvre souple étanche



Accroît le confort du patient

'élastique peut se positionner sur ou sous les oreilles du patient

La position sous les oreilles aide à prévenir l'irritation et la formation d'ulcération

Système de double lèvre étanche

Assurant une parfaite adaptation sur toute forme de visage

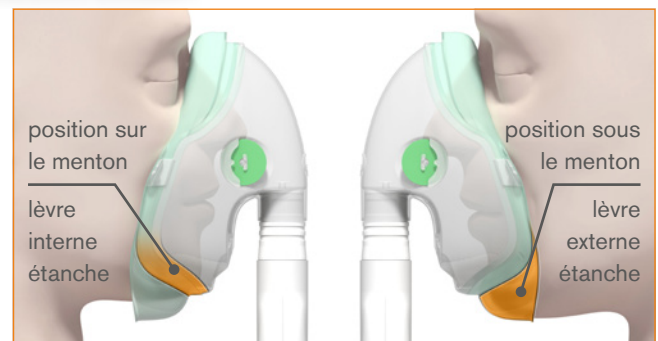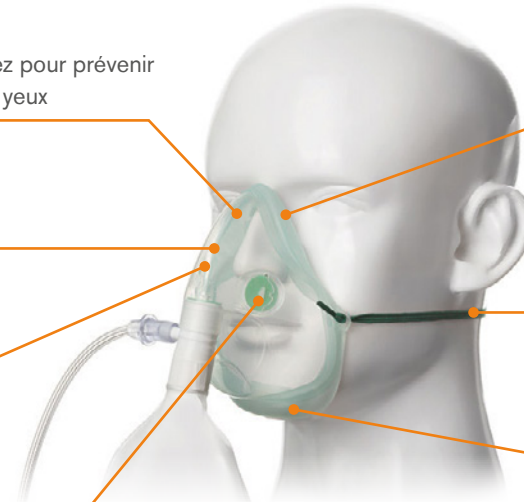

Référence	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1181015	Intersurgical EcoLite, adulte, masque oxygène haute concentration avec tuyau	2.1m	24

Faire une demande

Regarder la vidéo

Produit à faible impact environnemental

IS10.17 BEFR • Issue 9 12.22



Intersurgical Benelux B.V. Vluchttoord 28, 5406 XP, Uden, Nederland

T: +31 (0)413 243 860 F: +31 (0)413 243 869 info@intersurgical.be be-fr.intersurgical.com



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 et MDSAP

Pensez-y avant d'imprimer
Économisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.