




Air-Guard Clear

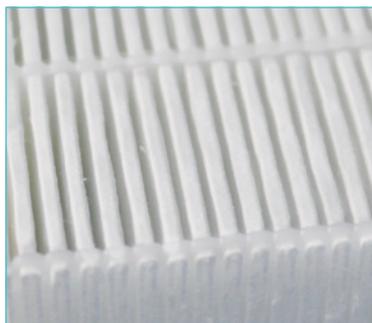

Gestion des Voies Aériennes ▪ Filtres Respiratoires

Air-Guard™

Pour une utilisation sur respirateurs ou concentrateurs d'oxygène

Intersurgical vous présente le filtre Air-Guard Clear, un filtre hydrophobe à membrane plissée conçu pour la protection des respirateurs d'anesthésie, de soins intensifs, de transport, ou des concentrateurs d'oxygène.


Le filtre Air-Guard Clear agit comme une barrière antimicrobienne lorsqu'utilisé sur des respirateurs ou concentrateurs d'oxygène pour les protéger d'une éventuelle contamination. Il est validé contre les attaques bactériennes et virales, sur une durée de 24 heures, suivant la procédure décrite dans le protocole BS EN 13328-1 (Bactérien/viral).

A la discrétion du clinicien, le filtre Air-Guard Clear peut être utilisé pour une durée prolongée en protection des concentrateurs d'oxygène. De nombreux filtres bactériens/viraux sont contre-indiqués pour des durées d'utilisation supérieures à 24 heures car ils ne sont pas validés pour une utilisation prolongée.


Ce dispositif excelle en matière de filtration bactérienne et virale et peut être utilisé comme tel au sein d'un circuit respiratoire, en respectant la durée maximale d'utilisation de 24 heures, correspondant aux procédures correctes habituelles relatives aux filtres respiratoires.

Précaution : ce produit est contre-indiqué pour une utilisation à la connexion patient du circuit respiratoire.

Protection des respirateurs

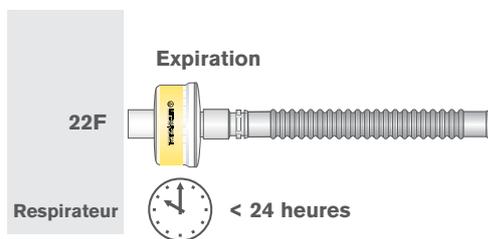

Protection des concentrateurs d'oxygène

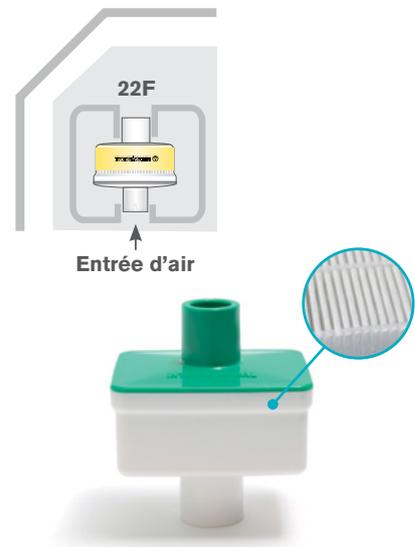

Référence	1790000 (S*)	1788000
Qté/bte	50 (40*)	50
Efficacité de filtration	>99.9999%	>99.9999%
Résistance au débit à 30L/min	0.9cm H ₂ O	0.7cm H ₂ O
Résistance au débit à 60L/min	1.9cm H ₂ O	1.7cm H ₂ O
Volume compressible	120ml	120ml
Poids	56g	53g
Connexions	22F-22M/15F	22F-22M/15F
Volume courant minimum	>360ml	

Faire une demande

(S*) Ajoutez un S à la fin du code produit à sept chiffres pour commander la version stérile du produit ex.

1790000S (la quantité par boîte des produits stériles est indiquée entre parenthèses).

IS12.14 BEFR • Issue 6 06.23



Intersurgical Benelux B.V. Vluchttoord 28, 5406 XP, Uden, Nederland

T: +31 (0)413 243 860 F: +31 (0)413 243 869 info@intersurgical.be be-fr.intersurgical.com



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 9001:2015, ISO 13485:2016,
ISO 14001:2015 et MDSAP

Pensez-y avant d'imprimer
Économisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce
document, faites-le recto verso.