




## Spirométrie incitative

Spiromètre incitatif SPIRO-BALL® et entraîneur respiratoire TRI-BALL®

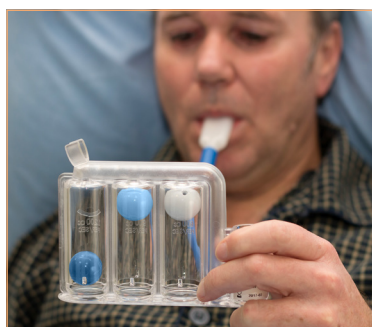

Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Kinésithérapie Respiratoire

## SPIRO-BALL®

Le spiromètre incitatif volumétrique SPIRO-BALL® est un dispositif à usage patient unique conçu pour aider les patients ayant subi une intervention abdominale, thoracique, ou bien souffrant de maladies entraînant une baisse de la capacité respiratoire, à retrouver une respiration normale. Le dispositif offre une aide visuelle pour le patient comme pour le clinicien afin d'indiquer et de surveiller la progression. Le clinicien peut définir un volume cible que le patient tente d'atteindre en inspirant à travers le dispositif.

### Indicateur de débit

Contrôle intuitif du débit grâce à des visages expressifs

### Tube inspiratoire

Tube flexible avec embout buccal



### Curseur de cible

Motiver l'exercice avec le curseur de cible

### Deux filtres à particules dans le système respiratoire

Prévient le risque d'inhalation de corps étrangers

REF	Description	Qté/bte
25913000	SPIRO-BALL® spiromètre incitatif volumétrique 4000ml (adulte)	12
25913003	SPIRO-BALL® spiromètre incitatif volumétrique 5000ml (adulte)	12
25900259	SPIRO-BALL® spiromètre incitatif volumétrique 2500ml (pédiatrique)	12

## TRI-BALL®

TRI-BALL® encourage le patient à atteindre une inspiration maximale soutenue, appelée technique SMI (Sustained Maximal Inspiration). La SMI est un exercice de respiration lente et profonde qui, répétée plusieurs fois par jour, peut réduire les complications respiratoires.

### Tube flexible avec embout buccal

Contient un filtre à particules

### Usage patient unique

Réduit le risque de contamination croisée



### Trois billes à code-couleur en compartiments séparés

Permettent l'exercice de trois différents niveaux d'inspiration

REF	Description	Qté/bte
25912000	TRI-BALL®exerciseur respiratoire	12

SPIRO-BALL® et TRI-BALL peuvent être utilisés jusqu'à 30 jours.